

# ZABIEGI GINEKOLOGICZNE I UROLOGICZNE



Nowy, inteligentny Practico

Zaprojektowany z myślą o doskonałej ergonomii do zabiegów ginekologicznych i urologicznych.

# Nowy, inteligentniejszy Practico do zabiegów ginekologicznych i urologicznych - ergonomia w najlepszym wydaniu

Nowy, inteligentniejszy Practico to elastyczne rozwiązanie dla każdej sali operacyjnej wykonującej zabiegi ginekologiczne i urologiczne. Dzięki szerokiemu zakresowi regulacji wysokości, nowy, inteligentniejszy Practico jest odpowiedni dla wszystkich operatorów - mniejszych lub wyższych, z doskonałą ergonomią.

## Chirurgia ginekologiczna



### Świetny dostęp dla chirurga

Dzięki szerokiej regulacji wysokości smarter Practico to ergonomiczne rozwiązanie dla wszystkich chirurgów.



Korzystanie z programowalnej pozycji pamięci

## Chirurgia urologiczna



### Super wysoko i super nisko

Funkcja przesuwania umożliwia chirurgowi bardzo bliski dostęp do pacjenta.



### Wygodne dla pacjenta

Lekkie sekcje nóg zapewniają dodatkowy komfort dla pacjenta przed zabiegiem.

Odpowiednie, ale nie ograniczone do np. następujący:

- Chirurgia endometriozy
- Chirurgia w przypadku depresji macicy i ścian pochwy
- Skrobanie macicy
- Leczenie guzów mięśni macicy (leczenie mięśniaków)
- Usunięcie macicy
- Usuwanie hydroponiki
- Laserowa chirurgia prostaty
- Operacja moszny
- Usuwanie nasion (nasienie)
- Widzenie pęcherza (cystoskopia)

“ Dostęp chirurga jest doskonały. Slajd podłużny to bardzo dobra opcja w zabiegach ginekologicznych i urologicznych. ”

Erkki Riihinen, technik na sali operacyjnej

Uwaga: wszystkie zilustrowane pozycje pacjentów są tylko przykładami i można wykonać różnego rodzaju procedury w oparciu o potrzeby osobiste lub kulturowe. Właściwe ułożenie pacjenta musi być wykonane przez przeszkolonego profesjonalistę.

## Sekcje nóg



## Lifting columns



# Zoptymalizowane rozwiązanie

Nowoczesne funkcje pozwalają skupić się na wykonywanym zadaniu, a doskonała ergonomiczna konstrukcja poprawia komfort całego zespołu chirurgicznego. **Komfort prowadzi do koncentracji, pewności siebie i lepszej współpracy. To jest wydajność.**

## Konfiguracja stołu operacyjnego i akcesoria

**Wersja z niską kolumną podnoszącą:  
540–1030 mm**

Najniższy możliwy stół operacyjny do zabiegów ginekologiczno-urologicznych


**Standardowa sekcja plecowa**

**Podpory rąk (2 szt.) 19185**  
uzupełnia stół operacyjny dla doskonałej ergonomii dla pacjenta


**Lekki podnóżek**

**Strzemiona 100012806**

Wózek na strzemiona do zamówienia osobno

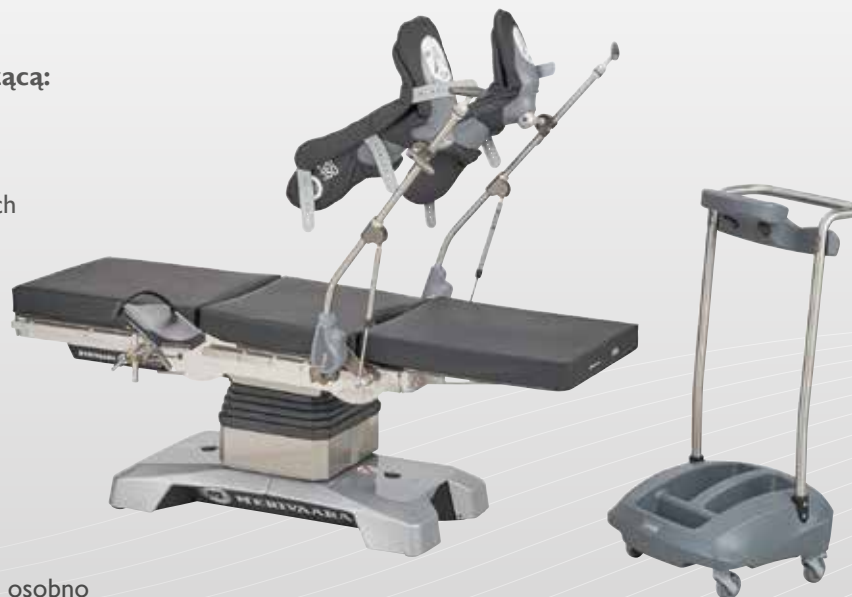

## Sekcje głowy

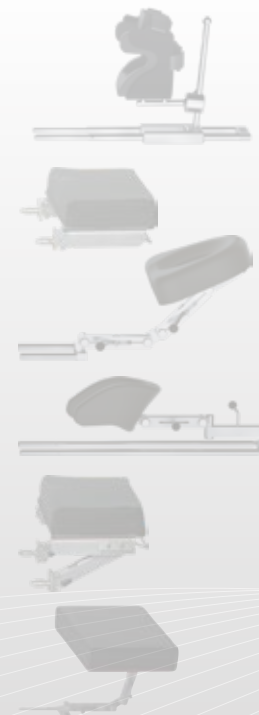

## Sekcje pleców



**Wysoka wersja: 640–1130 mm    Ogólna wersja: 585–885 mm    Niska wersja: 540–1030 mm**

Note: the configuration mentioned above is only an example. Please consult your sales representative for suitability into your operations.

# Specyfikacja techniczna

Practico I45000

Kąt Trendelenburga (stopnie)	+ / - 30
Kąt pochylenia (stopnie)	+ / - 20
Przesuw (mm/cale)	390 / 15,6"
Kąt oparcia (stopnie)	+ 70 / - 40
Zmotoryzowany kąt sekcji nóg (stopnie) - opcja	+ 70 / - 105
Kąt sekcji nogi bez silnika (stopnie) - opcja	Różni się w zależności od wybranej opcji
Wysokość Practico Max Niski (mm / cale)	540-1030 / 21,3"-40,6"
Szerokość blatu (mm / cale)	540 / 21,3"
Liczba pozycji pamięci	1



Przeczytaj więcej o  
nowym, inteligent-  
niejszym Practico  
[smarterpractico.com](http://smarterpractico.com)  
[merivaara.com](http://merivaara.com)



Merivaara Corp.  
FI-15150 Lahti, FINLAND  
Tel. +358 3 3394 611  
[merivaara@merivaara.com](mailto:merivaara@merivaara.com)

[www.merivaara.com](http://www.merivaara.com)

Stan informacji, specyfikacji i ilustracji zawartych w tej publikacji jest określony datą publikacji. Choć z największą starannością opracowano jego kompilację, Merivaara Corp. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy lub pominięcia. Merivaara Corp. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w technologii, funkcjach, specyfikacjach i konstrukcji sprzętu i modeli bez uprzedzenia. Najnowsze zaktualizowane specyfikacje i inne informacje można znaleźć na stronie internetowej Merivaara.

Wszystkie znaki towarowe są własnością Merivaara, chyba że określono inaczej. Patenty przyznane lub oczekujące.



© Merivaara Corp. DOC ID: 6149EN-1. Date 08/2019